

Stand: 08.2021

## Einstellungen Kopplung zu „Romexis“ (Fa. Planmeca)

1. Voraussetzungen
2. Erforderliche Einträge in **ivoris<sup>®</sup>dent**, **ivoris<sup>®</sup>ortho**
3. Erforderliche Einträge in **ivoris<sup>®</sup>analyze**
4. Erforderliche Einträge in „Romexis“
5. Test Patientenübergabe von **ivoris<sup>®</sup>dent**, **ivoris<sup>®</sup>ortho** an „Romexis“
6. Test Patientenübergabe von **ivoris<sup>®</sup>analyze** an „Romexis“
7. Test Bildübernahme in **ivoris<sup>®</sup>analyze** über „VDDS“
8. Fehlermöglichkeiten

### 1. Voraussetzungen

- **ivoris<sup>®</sup>** muss installiert sein
- „Romexis“ und die dazugehörige VDDS-Schnittstelle müssen installiert sein

### 2. Erforderliche Einträge in **ivoris<sup>®</sup>dent**, **ivoris<sup>®</sup>ortho**

- ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird

### 3. Erforderliche Einträge in **ivoris<sup>®</sup>analyze**

- ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird


### 4. Erforderliche Einträge in Romexis

- es sind keine Einträge in Romexis erforderlich

## 5. Test Patientenübergabe von ivoris<sup>®</sup>dent, ivoris<sup>®</sup>ortho an „Romexis“

- klicken Sie auf den Menüpunkt „Kopplungen“ → „VDDS media“, wählen Sie „Romexis“ und bestätigen Sie mit „OK“

VDDS-media Schnittstelle - Patientenübergabe

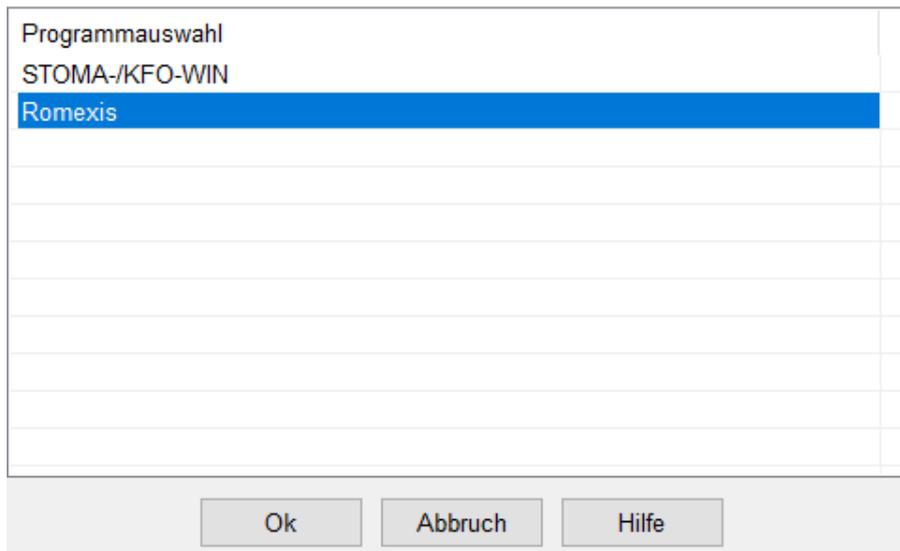

- „Romexis“ wird geöffnet und der Patient angemeldet



- wurden bei diesem Patienten zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese später hier wieder aufgerufen werden

## 6. Test Patientenübergabe von ivoris®analyze an „Romexis“

- klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

Röntgenauftrag/Datenabgleich

VDDS SIDEXIS DIMAXIS DIGORA CLINIVIEW DÜRR TROPHY

Patient

Name:  Nummer:

Vorname:  geboren:

Daten übergeben an

STOMA-/KFO-WIN	
Romexis	

Hilfe

Abbruch

Ok


- „Romexis“ wird geöffnet und der Patient angemeldet




- wurden bei diesem Patienten zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese hier später wieder aufgerufen werden

**7. Test Bildübernahme von Romexis in ivoris®analyze über „VDDS“**

- das Icon „Datenverwaltung“, dort den Ordner „Bildaufnahme“ und auf der rechten Seite den „VDDS-Schalter“ wählen

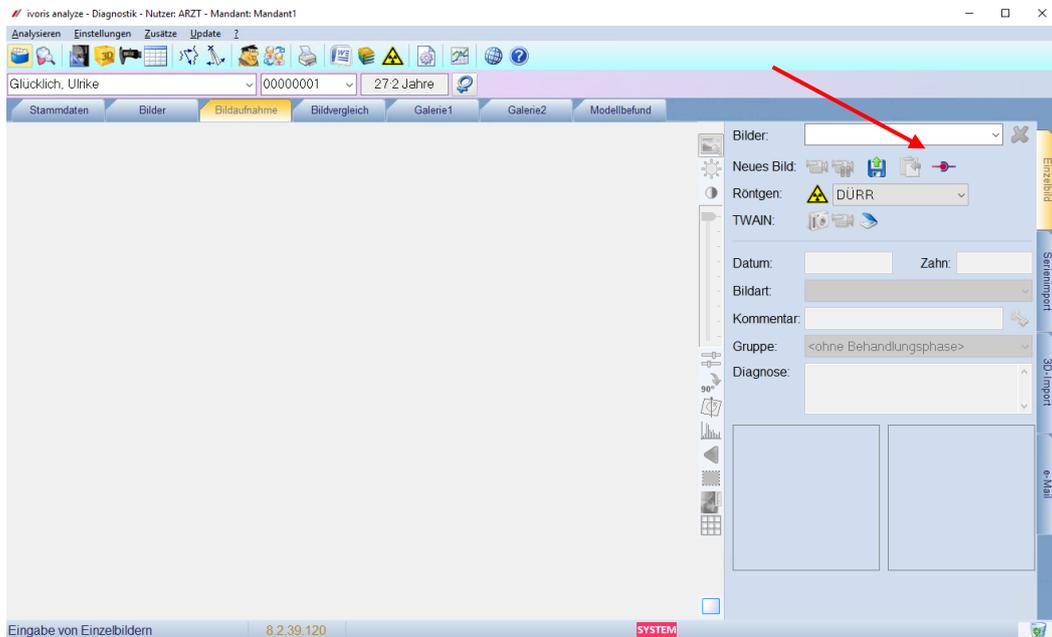

- bei Klick auf Romexis in der Liste werden die Bilder des Patienten angezeigt und können mit OK importiert werden

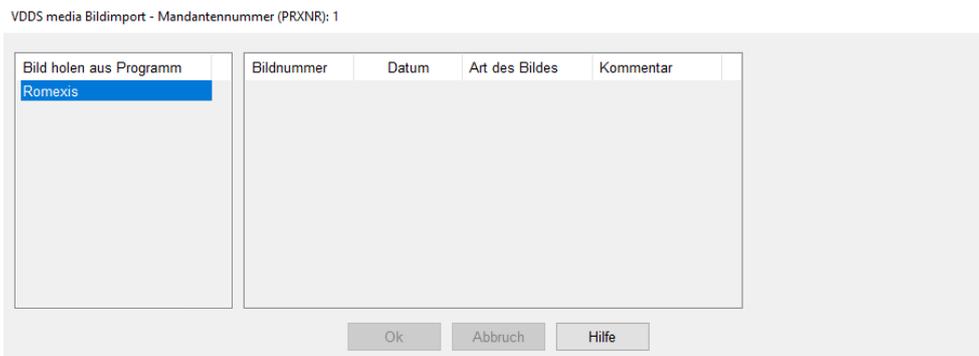

## 8. Fehlermöglichkeiten

Fehler	Ursache	Lösung
Röntgenshalter von ivoris®ortho oder ivoris®analyze ist nicht aktiv, trotz eingetragener Kopplung.	Modul „digital“ wurde nicht freigeschalten.	Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.
Romexis nicht als VDDSCient verfügbar in ivoris®analyze	Ältere Version von ivoris®analyze wird verwendet	Update 07.01.000x installieren Update ivoris®analyze installieren
Romexis nicht als VDDSCient in ivoris®ortho oder ivoris®analyze verfügbar	VDDS-Client von Romexis nicht installiert	VDDS installieren

Mit freundlichen Grüßen  
 Ihr Serviceteam der Computer konkret AG

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter [www.ivoris.de/agb](http://www.ivoris.de/agb).

Computer konkret AG  
 DentalSoftwarePower

Theodor-Körner-Straße 6  
 08223 Falkenstein

Tel.: +49 3745 78 24-33  
 Fax: +49 3745 78 24-633

[ivoris@computer-konkret.de](mailto:ivoris@computer-konkret.de)  
[info@ivoris.de](mailto:info@ivoris.de)  
[www.computer-konkret.de](http://www.computer-konkret.de)  
[www.ivoris.de](http://www.ivoris.de)

praxis  
 upgrade