

dms.net Update-Anleitung

Installationsvorbereitung


1. auf dem Server anmelden auf dem praxis-upgrade bzw. **dms.net Administrator** installiert ist
2. Updatedatei herunter laden → www.ivoris.de/dms-update

Hinweis:

- Vor dem Start Server auf Windows Updates prüfen.
- Ist .NET Framework 4.8 installiert? → Hardwarebetreuer bei Bedarf befragen
- Bitte die Installation des Updates auf keinen Fall unterbrechen.


Vorgang Update 24.2.

1. **dms.net** Backup erstellen
 - ✓ **dms.net** Admin auf dem Server öffnen
 - ✓ Anmelden wie in Punkt 11 beschrieben
 Datensicherung → Einrichten → Name vergeben → Speicherziel auswählen → Sofort starten

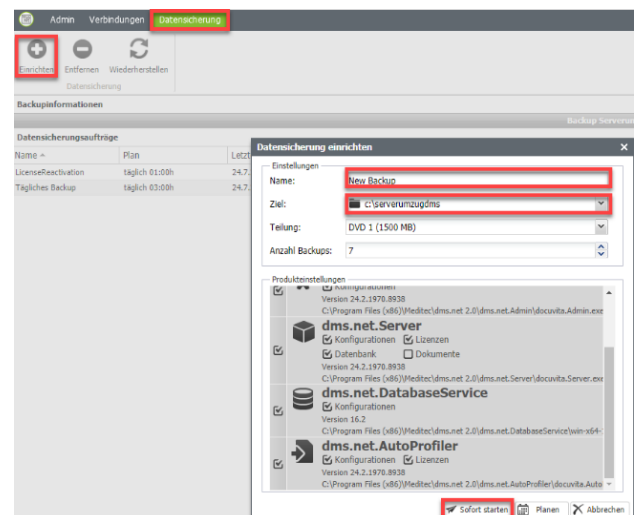


2. Installationsprogramm über Downloadlink herunterladen www.ivoris.de/dms-update
3. meditec.Server.Setup.zip Datei mit Rechtsklick extrahieren


Downloads

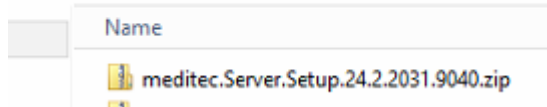


4. extrahierten Ordner doppelt anklicken und die Setup Datei starten

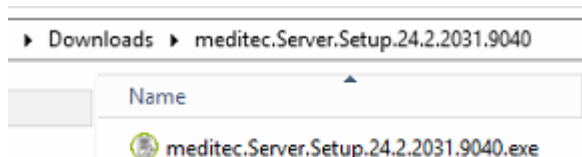


5. Mit **OK** bestätigen

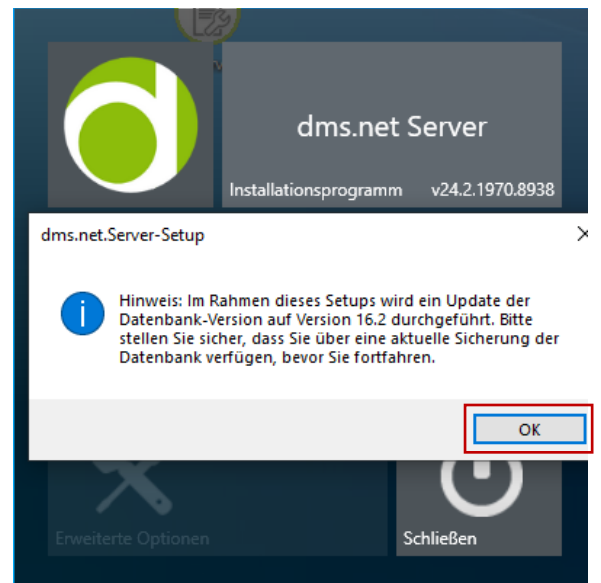


6. .NET4.8
Sollte dieses Fenster erscheinen, fehlt Ihnen das Framework .NET4.8, bitte installieren Sie dieses nach oder informieren Sie Ihren Hardwarebetreuer

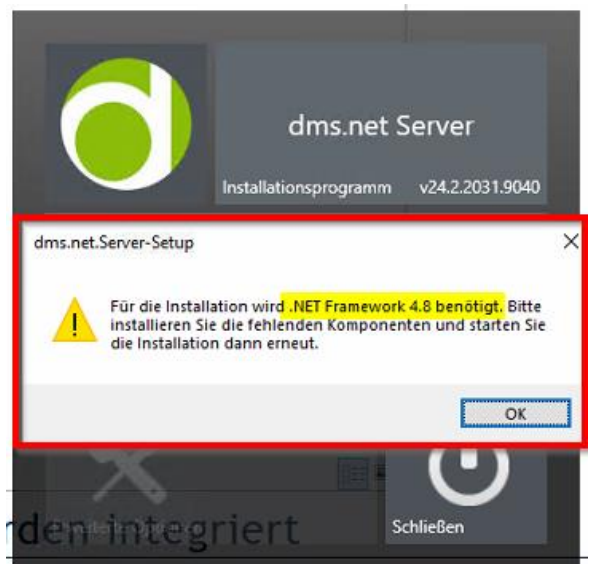


7. Installationsprogramm öffnet sich
8. **Update durchführen** anklicken

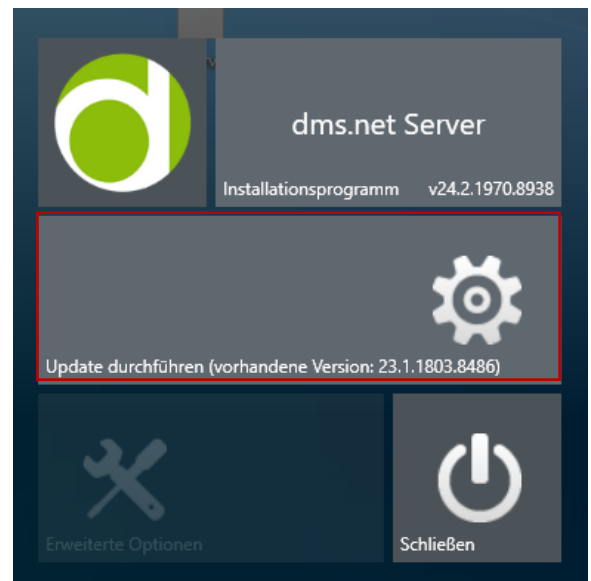


9. mit **Ja** bestätigen
(dieses Fenster erscheint optional)

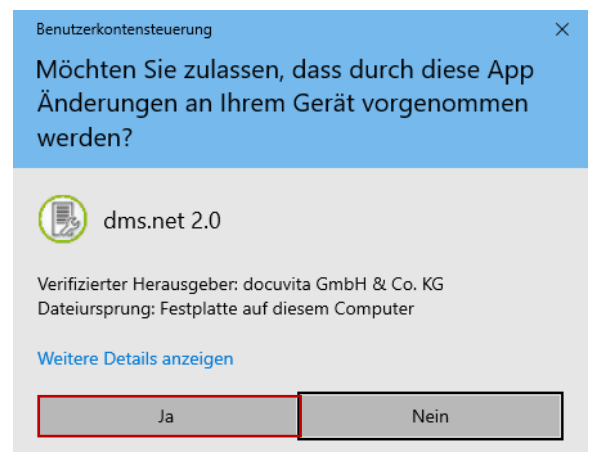


10. kurz warten → **dms.net** Administrator wird geöffnet

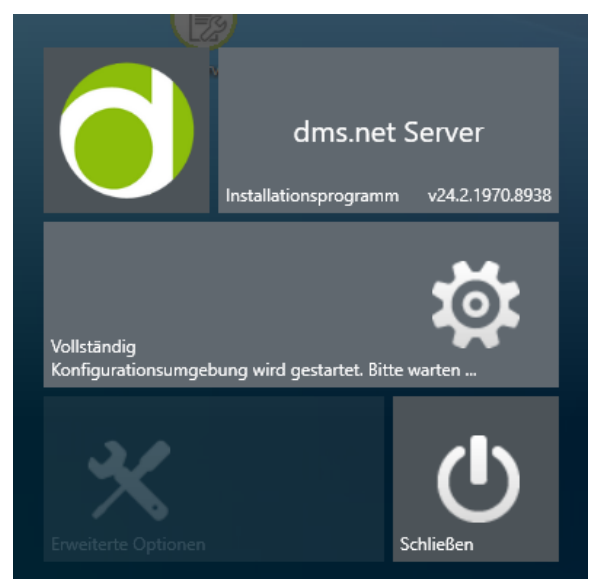

11. Mit den Administrator Anmeldedaten anmelden:
Benutzername: Administrator
Passwort: Adminck2016
Eventuell wurde das Passwort durch Sie oder Ihren IT-Betreuer geändert.
12. **Anmelden**

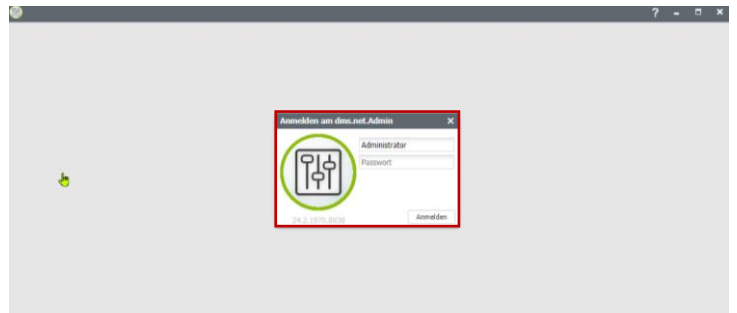


13. **Weiter**

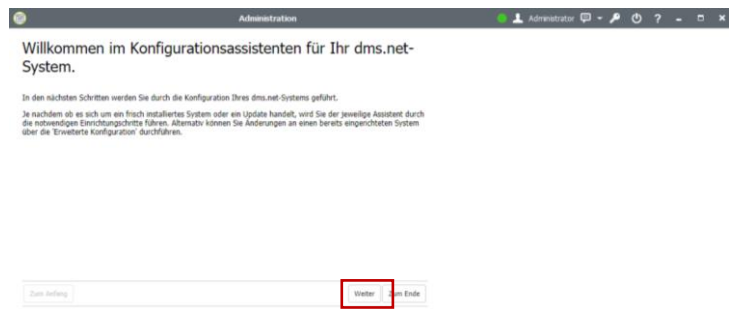


14. **Update starten** klicken



15. Updateassistenten → **Starten**

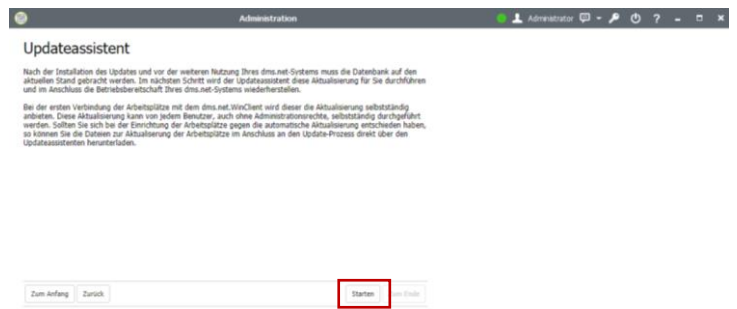


16. Der Installationsfortschritt wird mit grünen Punkten angezeigt.
- Hinweis:** Bitte die Installation des Updates auf keinen Fall unterbrechen.

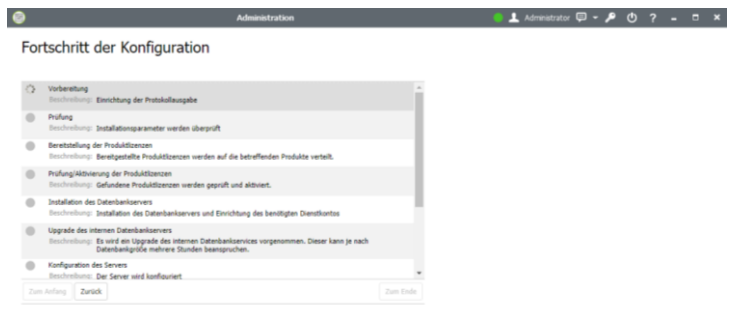


Hinweis:

Sollte die Installation hier an einer Stelle mit einem roten Punkt stoppen, kontaktieren Sie bitte den Support unter **03745 7824-33**

17. Weiter

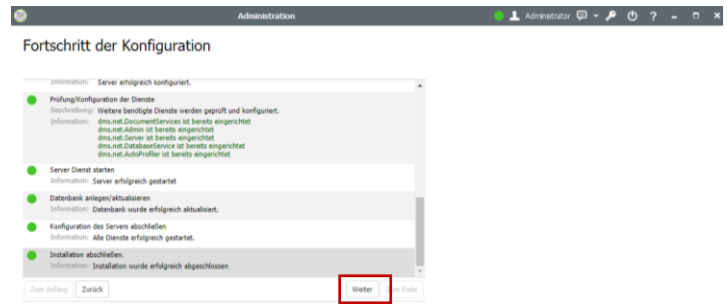


18. Nach erfolgreicher Installation, den Client herunterladen und in der PUCKTWHEALTH Freigabe speichern

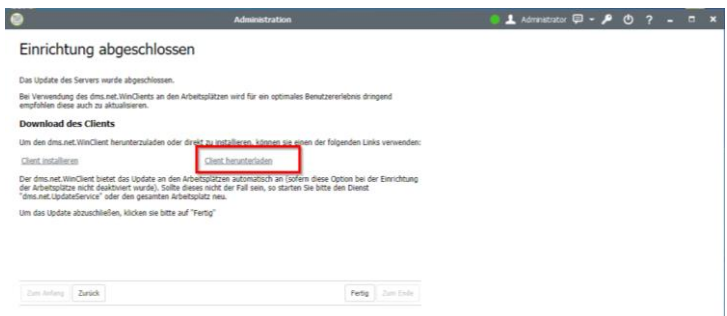


19. Bitte auf das **Logo klicken**


Es öffnet sich ein Explorer Fenster, hier können Sie den Speicherort festlegen.
Bsp.:
\\Server\PU_CKTWHEALTH
Danach kann das Fenster geschlossen werden.

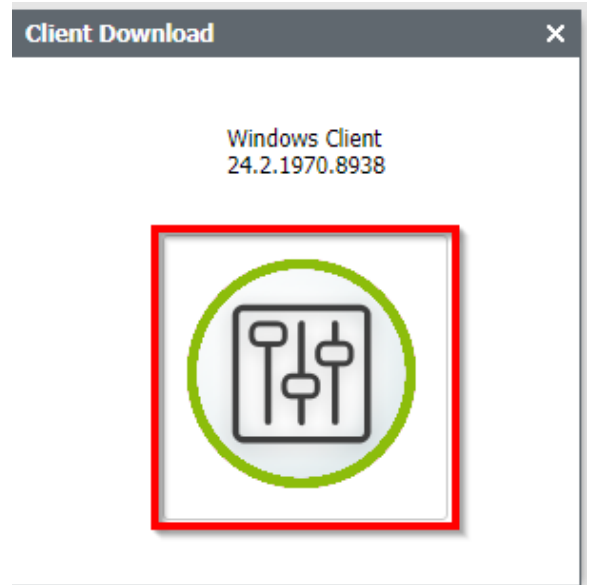


20. Fertig

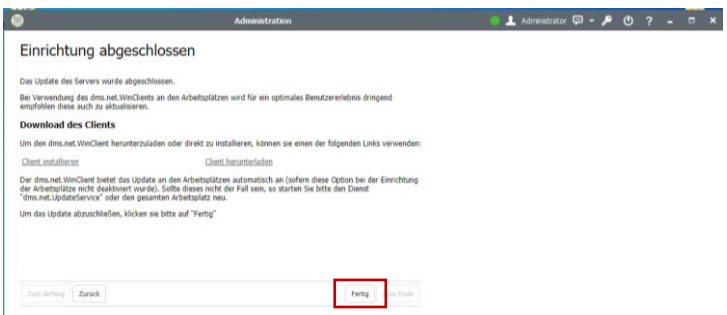


21. dms.net AutoProfiler **starten**

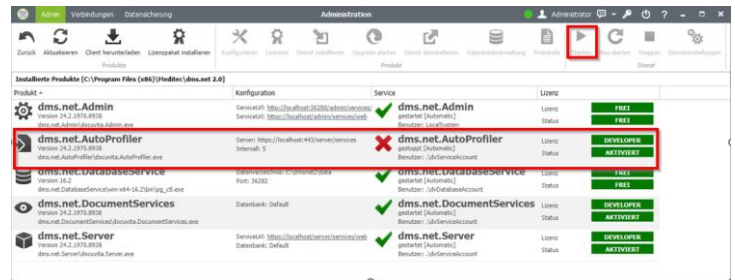

22. dms.net Admin **schließen**

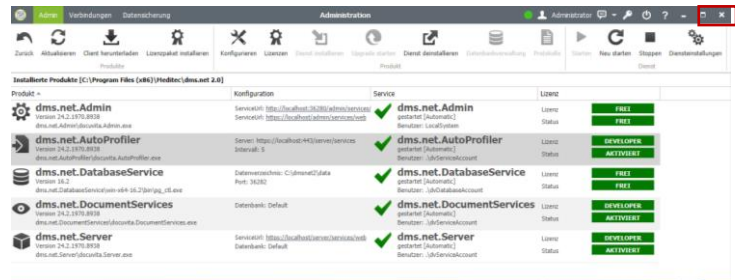

23. Installationsfenster **schließen**

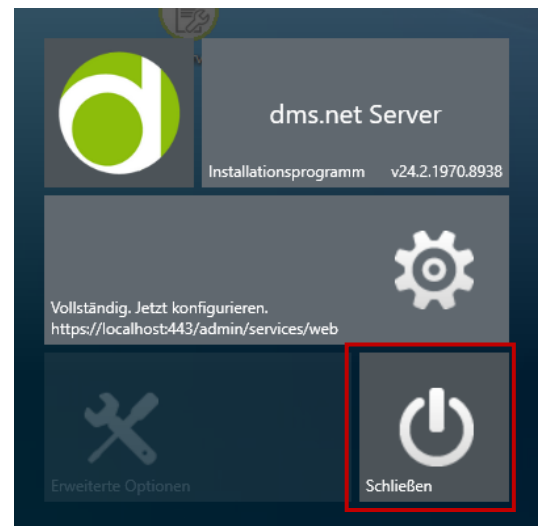

24. dms.net Client auf dem Server starten → Update mit **Ja** bestätigen

Hinweis: Der **dms.net** Client wird sich an jeder Arbeitsstation updaten. Bitte an jeder Station das Update mit Ja bestätigen.

An Terminalservern muss das Update zwingen manuell gestartet werden. Die Datei dazu haben Sie unter **Schritt 16** abgelegt. Starten Sie dieses einfach per Doppelklick.

